

# ***Ionenaustauscher***

***Alles, was dazugehört...***

## ***P2/30 SK***

Das druckfeste Leitfähigkeitsmeßgerät mit integrierter Meßelektrode ist für den direkten Anschluß an unsere Edelstahl-Ionenaustauscher gedacht. Es paßt auf den Reinstwasseraustritt unserer Modelle SG . . . SK. Meßbereich: bis 30  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (230 V/50 Hz).



## ***LFW-200***


Dieses digitale Leitfähigkeitsmeßgerät für den Wandaufbau besticht durch seine klare Funktionalität und modernes Design. Es bietet Anschlüsse für Elektroden mit und ohne Temperaturkompensation und Magnetventil, Schwimmschalter sowie stufenlose Grenzwerteinstellung, akustische Alarmmeldung und potentialfreie externe Meldung. Meßbereich: 0,1 bis 199,9  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (230 V/50 Hz).



## ***Verteilerblöcke***

Diese Verteilerblöcke aus Kunststoff regeln die Reinstwasserverteilung mit zwei, drei oder vier Ventilen. Robuste Ausführung, mit Absperrkugelventilen ausgestattet. Zur Wandmontage.



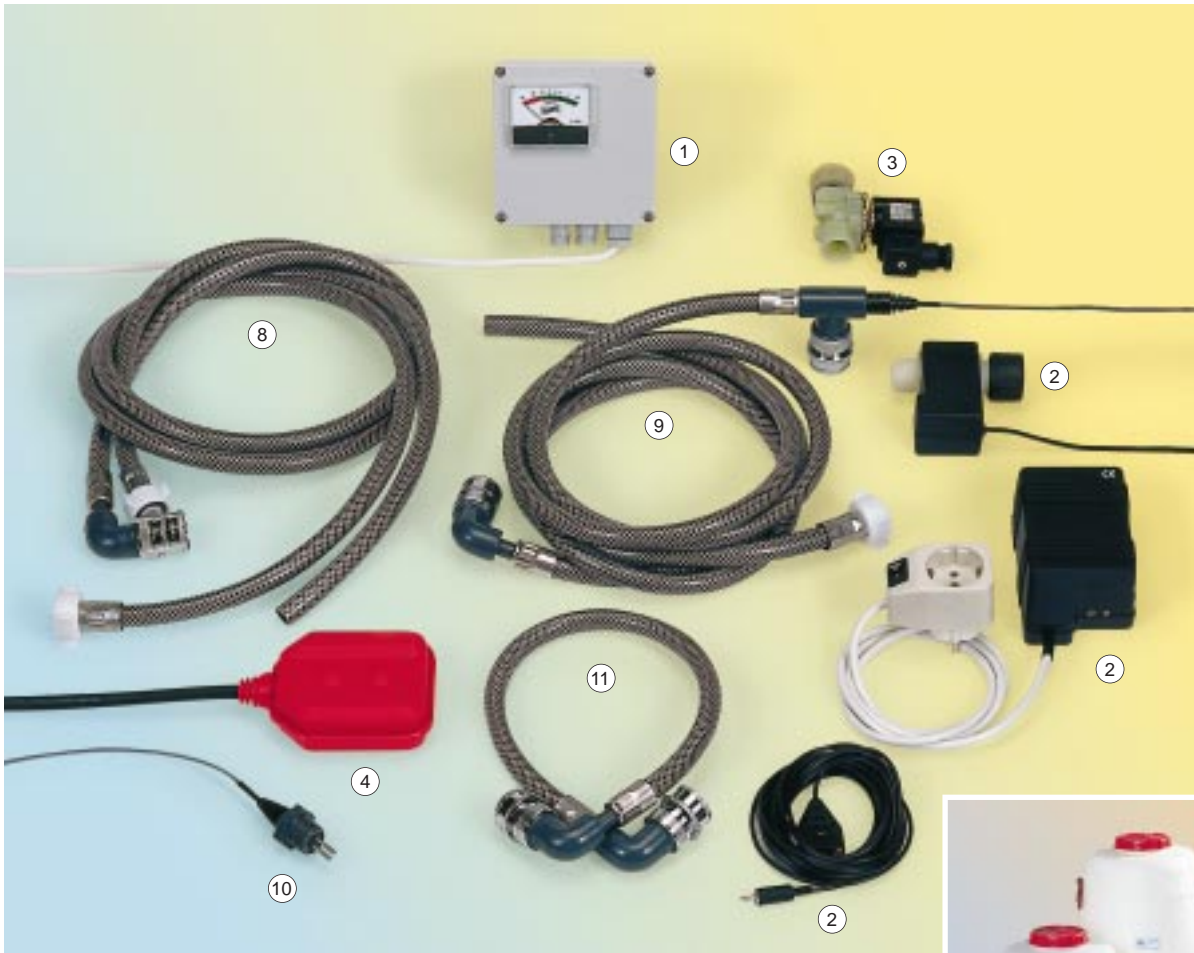

Gerät	Bez.	Abb.-Nr.	Artikel-Nr.
Leitfähigkeitsmeßgerät	P 2/30 SK*	Seite 8	1600
Leitfähigkeitsmeßgerät m. Verschraubung	P 2/30	–	10510
Leitfähigkeitsmeßgerät	LFW 200	Seite 8	1605
Leitfähigkeitsmeßgerät	P 1/50 WA	1	10540
Wasserwächter		2	00029
Magnetventil		3	1750
Schwimmschalter		4	1755
Vorratsbehälter	15 l	5	05198
Vorratsbehälter	30 l	6	05188
Vorratsbehälter	50 l	7	05189
Vorratsbehälter	80 l	–	05190
Vorratsbehälter	125 l	–	05234
Schlauchsatz ohne Elektrode	SK*	8	1690
Schlauchsatz mit Elektrode	SK*	wie Abb. 9	1610
Schlauchsatz mit Elektrode	SK / TK**	9	1611
Schlauchsatz SG 7000 – 15000 m. Schlauchverschraubung u. Elektrode		–	1613
Schlauchsatz SG 7000 – 15000 m. Schlauchverschraubung u. Elektrode	TK**	–	1614
Einschraubelektrode	1/2 "	10	1670
Einschraubelektrode	1/2 " TK**	wie Abb. 10	1671
Verbindungsschlauch	SK*	11	1630
Umrüstsatz auf SK*		–	1640
Verteilerblock	VB II	Seite 8	1702
Verteilerblock	VB III	Seite 8	1703
Verteilerblock	VB IV	Seite 8	1704

\*SK = Steckkupplung

\*\*TK = Temperaturkompensation in Verbindung mit LFW 200

**...und noch vieles mehr**

Unser reichhaltiges Zubehörsortiment bietet Ihnen unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten. Wir verfügen über die passenden Verbindungsschläuche, Verteilerblöcke, Vorratsbehälter in beliebiger Größe . . . , aber sehen Sie selbst. Sie finden jedes Zubehörteil mit Hilfe der Nummerierung in Foto und Tabelle.