

Liquid Handling in Perfektion

PIPETTIEREN MIT LEICHTIGKEIT UND KOMFORT

NEU!



VITLAB 
Competence in Labware


Pipettierhelfer für Mess- und Vollpipetten

Pipettierhelfer VITLAB maneus

VITLAB hat sich auf das volumengenaue Dosieren, Titrieren und Pipettieren spezialisiert und bietet ein Programm hochentwickelter Präzisionsgeräte für vielfältige Liquid Handling Anwendungen.

Der neue Pipettierhelfer VITLAB maneus ermöglicht Links- wie Rechtshändern das leichte, ermüdungsfreie

Arbeiten mit allen gängigen Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 100 ml. Die sichere und sehr einfache Bedienung erlaubt auch dem ungeübten Anwender die präzise, extrem feinfühligkeit Einstellung des Meniskus. Der VITLAB maneus ist einfach zu demontieren, sehr leicht zu reinigen und komplett autoklavierbar.

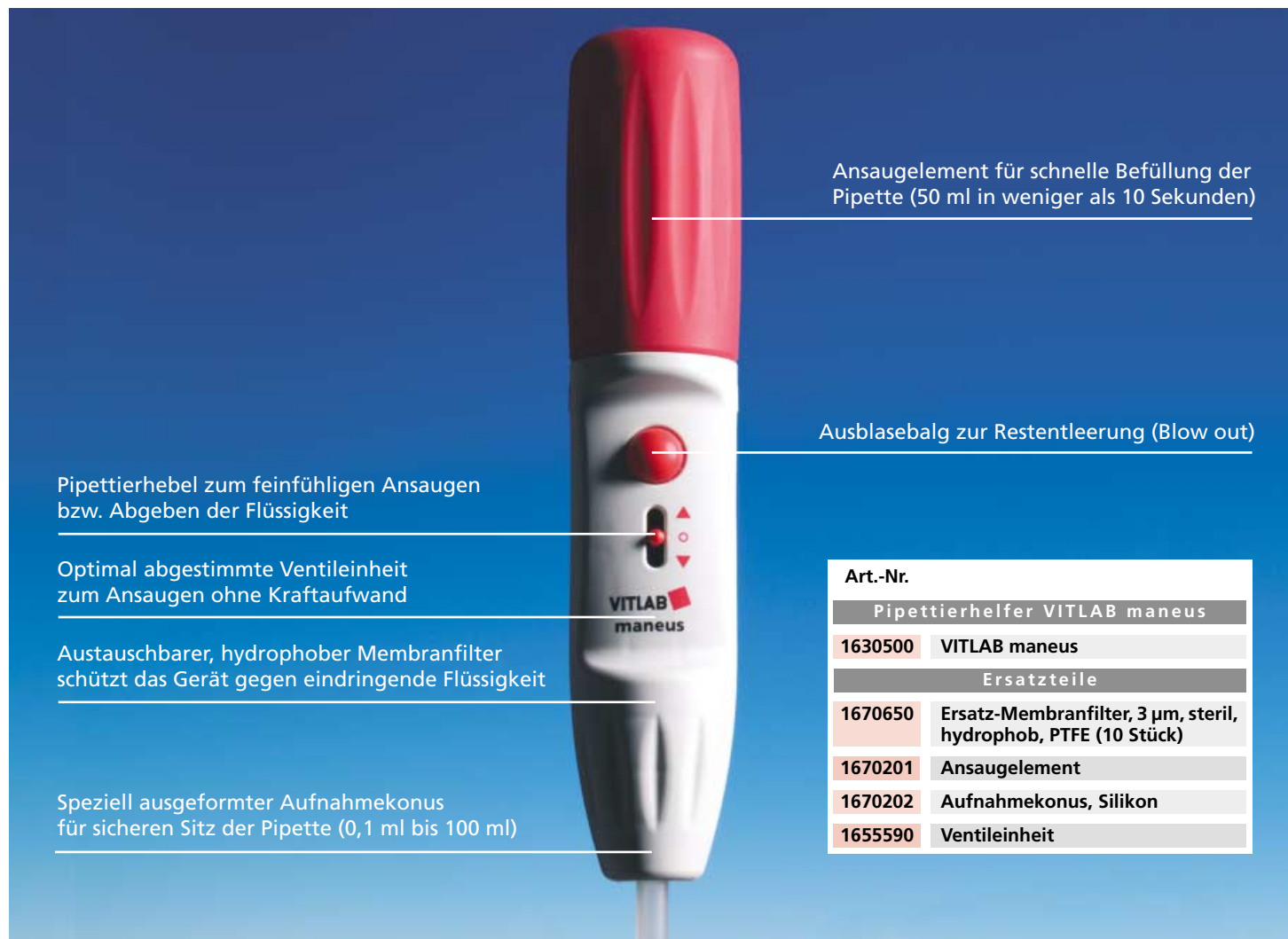

Ansaugement für schnelle Befüllung der Pipette (50 ml in weniger als 10 Sekunden)

Ausblasebalg zur Restentleerung (Blow out)

Pipettierhebel zum feinfühligkeit Ansaugen bzw. Abgeben der Flüssigkeit

Optimal abgestimmte Ventileinheit zum Ansaugen ohne Kraftaufwand

Austauschbarer, hydrophober Membranfilter schützt das Gerät gegen eindringende Flüssigkeit

Speziell ausgeformter Aufnahmekonus für sicheren Sitz der Pipette (0,1 ml bis 100 ml)

Art.-Nr.	
Pipettierhelfer VITLAB maneus	
1630500	VITLAB maneus
Ersatzteile	
1670650	Ersatz-Membranfilter, 3 µm, steril, hydrophob, PTFE (10 Stück)
1670201	Ansaugement
1670202	Aufnahmekonus, Silikon
1655590	Ventileinheit