


# labopettor

*Präziser geht's kaum.*

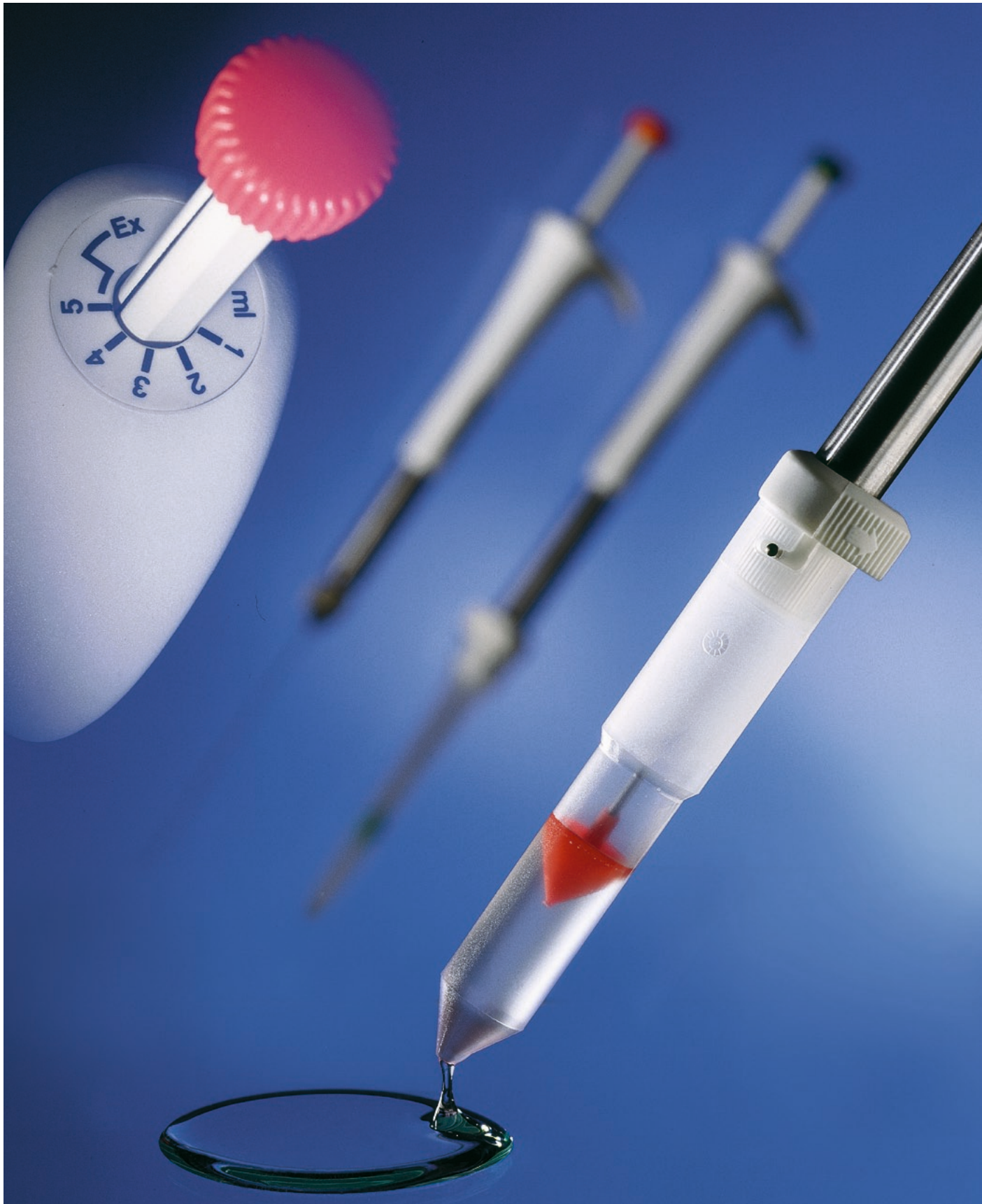

# Pipettieren auf höchstem Niveau - das Direktverdrängungsprinzip.

labopettor-Pipetten zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus - unabhängig vom Medium. Auf Grund des Prinzips der direkten Flüssigkeitsverdrängung verbleibt nahezu keine Restbenetzung im Gerät. Auch das Pipettieren von stark gasenden Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck, hochviskosen Medien und Medien von extrem hoher Dichte ist möglich. Die Kolben/Spitzen-Einheit des Geräts ist für tausende von Pipettiervorgängen haltbar und im Bedarfsfall problemlos und kostengünstig austauschbar.

- direkte Flüssigkeitsverdrängung, daher äußerst genau
- medienunabhängig
- einfache und schnelle Volumenauswahl
- absolut reproduzierbar, durch feste Einstellstufen
- durch Color-Codes dem jeweiligen Volumen genau zuzuordnen
- absolut wartungsfrei
- wirtschaftlich: hunderte von Pipettiervorgängen mit einer Spitze möglich
- deckt den Routine-Bereich 1 - 5000 µl vollständig ab
- mit individueller Seriennummer und Einzelzertifikat

- praktisches Zubehör: labopettor-Aufbewehrungsstation für Gerät und Zubehör, so ist labopettor stets griff- und einsatzbereit



## Bestelldaten

### labopettor micro

#### Lieferumfang

1 Gerät komplett mit 3 stik, 3 tips (Glaskapillaren), 2 Klemmringen

Code-Nr.	Volumen	Unterteilung
940 01 01	1 - 5 µl	1 µl
940 01 02	5 - 25 µl	5 µl
940 01 03	10 - 50 µl	10 µl

### labopettor macro

#### Lieferumfang

1 Gerät komplett mit 1 stik, 1 tip

Code-Nr.	Volumen	Unterteilung
940 02 04	50 - 250 µl	50 µl
940 02 05	100 - 500 µl	100 µl
940 02 06	0,5 - 2,5 ml	0,5 ml
940 02 07	1,0 - 5,0 ml	1,0 ml

## Zubehör

## Zubehör

Code-Nr.	Ersatzteile	Größe	Stück per Set	Code-Nr.	Ersatzteile	Größe	Stück per Pack
941 01 01	labopettor-stik	1 - 5 µl	100	945 02 04	lab.-Set (stik + tips)	50 - 250 µl	10 + 10
941 01 02	labopettor-stik	5 - 25 µl	100	945 01 05	lab.-Set (stik + tips)	100 - 500 µl	10 + 10
941 01 03	labopettor-stik	10 - 50 µl	100	945 01 06	lab.-Set (stik + tips)	0,5 - 2,5 ml	10 + 10
942 01 01	labopettor-tips	1 - 5 µl	250	945 01 07	lab.-Set (stik + tips)	1,0 - 5,0 ml	10 + 10
942 01 02	labopettor-tips	5 - 25 µl	250	946 02 00	labopettor stand		
942 01 03	labopettor-tips	10 - 50 µl	250				
943 01 01	Klemmring	1 - 5 µl	2				
943 01 02	Klemmring	5 - 25 µl	2				
943 01 03	Klemmring	10 - 50 µl	2				
944 01 00	Überwurfmutter	1 - 50 µl	1				
946 01 00	labopettor stand						

Mehr über unsere Lösungen zum Pipettieren, Dosieren, Titrieren, Volumenmessen und über unsere Präzisions-Glaskapillare erfahren Sie unter [www.hirschmann-laborgeraete.de](http://www.hirschmann-laborgeraete.de)

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG

Hauptstr. 7 - 15

74246 Eberstadt, Germany

Tel. +49 (0) 71 34/5 11-0

Fax +49 (0) 71 34/5 11-90

[www.hirschmann-laborgeraete.de](http://www.hirschmann-laborgeraete.de)

[info@hirschmann-laborgeraete.de](mailto:info@hirschmann-laborgeraete.de)